



LÍNEAS DE LABORATORIO

ROTAVAPORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Rotavapores Evaporador Rotativo Modelo YR02307 // YR02310



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Rotavapores

Evaporador Rotativo

Modelo YR02307 // YR02310



Descripción del Producto:


El matraz de gran capacidad y gran apertura proporciona una mayor superficie de evaporación. El matraz de evaporación sigue girando cuando se calienta constantemente mediante un baño de agua, y el solvente se evapora de manera más eficiente en condiciones de vacío. Se puede utilizar para producción a escala piloto en ingeniería biológica, industria farmacéutica, industria química y procesamiento de alimentos. Por lo general, funciona con bomba de vacío de circulación de agua, bomba de vacío de diafragma, enfriador de recirculación, circulador de temperatura constante, bomba de circulación de baja temperatura, etc.

Ventajas:

- ✓ La tecnología patentada de doble sellado de teflón (PTFE) y caucho FV asegura el nivel de presión negativa.
- ✓ La válvula de conmutación automática hace posible la recolección continua sin afectar el grado de vacío y sin detener la destilación
- ✓ La válvula de descarga de teflón es resistente a la corrosión y libre de contaminación
- ✓ Chaqueta de baño de agua que protege al operador de quemaduras por líquido caliente


Componentes de Vidrio

Tres tipos de condensadores disponibles

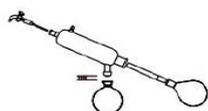


LN type

Condensador magro con mayor eficiencia de enfriamiento

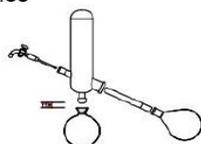

VN type

Condensador vertical con una huella más pequeña

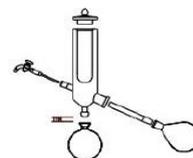

JN type

Condensador encamisado con temperatura más baja mediante

Accesorios



Matraz evaporador 500ml



Matraz evaporador 1 000ml



Frasco receptor 1000 ml



Anillo de sellado



Abrazadera para matraz receptor



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Rotavapores

Evaporador Rotativo

Modelo YR02307 // YR02310



Especificaciones Técnicas:

Modelo		YR02307	YR02308	YR02309	YR02310
Matraz de evaporación		5L, Ø 50mm	10L, Ø125mm	20L, Ø 125mm	50L, Ø125mm
Frasco de recepción (L)		3	5	10	20
Regulación de velocidad		Variable continua			
Fuente de alimentación		220-240V-, 50/60Hz		3-3801, 50Hz or 220V, 60Hz	
Potencia de calefacción (kW)		2	3.5	6	6
Potencia total (kW)		2.3	3.8	6.3	6.3
Velocidad de rotación (rpm)		20 – 140	20~130		20~110
Poder del motor		250			
Condensador		Bobinas de enfriamiento dual de tipo vertical	Trampas frías de triple enfriamiento de tipo vertical, principal + auxiliar	Tipo vertical, trampas de frío de triple enfriamiento principal + auxiliar	
Área de condensación (m²)	Main	0.278	0.39	0.948	1.15
	Auxiliary	–	0.253	0.358	0.4
Material de baño		Acero Inoxidable 304 Ø300mm x 170mm	Acero Inoxidable 304 Ø370mm x 220mm	Acero Inoxidable 304 Ø450mm x 260mm	Acero Inoxidable 304 Ø550mm x 320mm
Rango de temperatura		RT – 95°C			
Pantalla de temperatura		LCD			
Tasa de aumento de presión del sistema de vacío		≤2kPa/h			
Velocidad de evaporación (L / h)	Agua	2.0	3.2	5.0	9.0
	Etanol	5.4	8.6	14.3	24.5
Función de elevación		Elevación motorizada			Elevación motorizada + Elevación manual
Carrera de elevación (mm)		0 ~ 150	0 ~ 160	0 ~ 190	0- 180
Dimensiones (mm)		840W x 460D x 1090H	990W x 550D x 1 740H	1120W x 680D x 1 900H	345W x 770D x 2 230H
Peso neto / kg)		35	61	90	140



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which an eye or camera can see objects that are too small to be seen by the unaided eye.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space or object to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

