



LIGNES DE LABORATOIRE

PLAQUE CHAUFFANTE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide


Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Plaque Chauffante

Agitateur Magnétique Avec Plaque Chauffante (Hot Plate)

Modèle YR02951 // YR02952

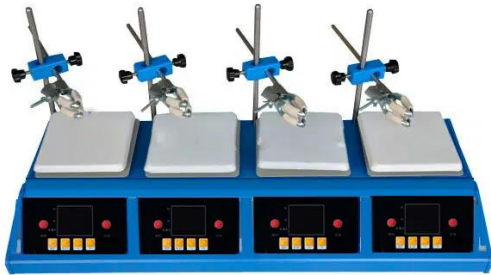

Description du produit:

Les agitateurs magnétiques sont souvent utilisés en chimie et en biologie. Ils sont préférés aux agitateurs motorisés à engrenages car ils sont plus silencieux, plus efficaces et n'ont pas de pièces externes mobiles susceptibles de se casser ou de s'user (autre que le simple aimant à barre lui-même). En raison de sa petite taille, un barreau d'agitation est plus facilement nettoyé et stérilisé que d'autres dispositifs d'agitation. Ils ne nécessitent pas de lubrifiants qui pourraient contaminer le réacteur et le produit. Ils peuvent être utilisés à l'intérieur de cuves ou de systèmes hermétiquement fermés, sans avoir besoin de joints rotatifs compliqués. Les agitateurs magnétiques peuvent également comprendre une plaque chauffante ou tout autre moyen pour chauffer le liquide.

Caractéristiques:

- ✓ Très compact et simple à utiliser
- ✓ Affichage numérique de la température et de la vitesse, température de chauffage : Rt-380 degrés et vitesse de mélange : 100-1800 tr/min.
- ✓ Boîtier en alliage d'aluminium résistant à la chaleur et à la corrosion pour plus de durabilité
- ✓ Plaque chauffante en aluminium revêtue de céramique pour une excellente répartition de la chaleur et une résistance à la corrosion
- ✓ Le boîtier spécialement conçu empêche les déversements d'endommager les composants électroniques à l'intérieur
- ✓ La plaque d'isolation thermique secondaire empêche la perte de chaleur et élimine les dommages causés par la chaleur aux composants électroniques
- ✓ Température et vitesse de rotation réglables



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Plaque Chauffante

Agitateur Magnétique Avec Plaque Chauffante (Hot Plate)

Modelé YR02951 // YR02952



Description du produit:

Modèle	YR02951	YR02952
Matériau de la plaque supérieure	Céramique Blanche	
Retirer	0 ~ 2500 tr/min	
Supprimer la précision de la vitesse	± 1 tr/min	
Dimension céramique supérieure pour chaque position	140 × 140	180 × 180
Temps de travail	Continuez	
Postes	Deux	
Vitesse d'agitation	Écran numérique	
Plage de température pour chaque position	Environnement à 400 degrés	
Précision de la température	± 1 degré	
Contrôle de la température	PID	
Affichage de la température	Écran numérique	
Thermostat extérieur	Pour mesurer et contrôler la valeur de la température du liquide avec le panneau avant	
Thermostat d'intérieur	Contrôle et mesure la température de l'agitateur à plaque chauffante	
Puissance moteur pour chaque position	8W DC14V	8W DC14V
Puissance du produit pour chaque position	260	410
Capacité d'agitation pour chaque position	50ml-1000ml	2000
Matériau du boîtier	Métal superfin	
Poids net / kg)	sept	dix



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is a device that uses light or other electromagnetic radiation to illuminate a specimen and create a magnified image of it. This is achieved through a series of lenses or mirrors that collect light from the specimen and project it to the eye or a camera.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food, medicine, and other perishable items. It is a device that uses a refrigerant to cool and maintain a low temperature. This is achieved through a cycle of compression, condensation, expansion, and evaporation. The refrigerator is a key piece of equipment in a laboratory, as it is used to store and maintain a wide range of biological and chemical samples.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

