



LIGNES DE LABORATOIRE

AUTOCLAVES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.




#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.

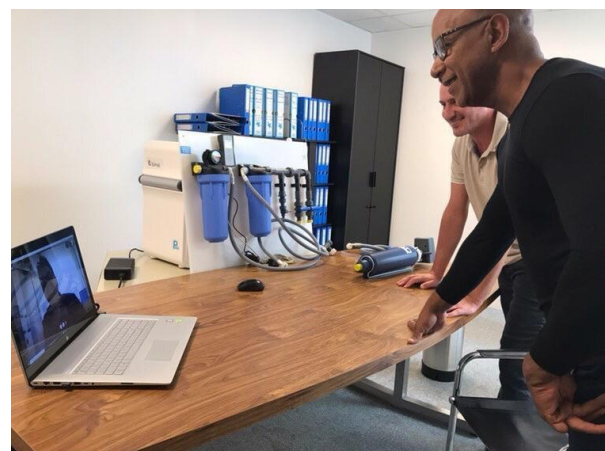

Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vide pulsé à affichage LCD avec imprimante

Modelé YR05673 // YR05675



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vide pulsé à affichage LCD avec imprimante

Modèle YR05673 // YR05675



Description du produit:

- ✓ Contrôlé automatiquement par microprocesseur, affichage LCD de l'état de fonctionnement, touche tactile.
- ✓ Il affiche dynamiquement la température, la pression, le temps, le taux de vide, le séchage, l'alarme, le niveau d'eau et le cycle complet.
- ✓ Route entièrement automatique pour ajouter de l'eau, vide pulsé, chauffage, stérilisation, vidange, évacuation, séchage sous vide.
- ✓ Une procédure unique de séchage sous vide pulsé est conçue et l'humidité résiduelle de l'instrument est inférieure à 0,2 %.
- ✓ Le taux de vide peut atteindre -0,081 MPa, il convient à divers instruments, y compris les pansements emballés, non emballés, solides, creux de type A, B, soit avec plusieurs ouvertures, soit avec des tubes insérés.
- ✓ Avec 4 programmes prédéfinis (instrument, textile, caoutchouc, liquide), programme défini par l'utilisateur, programmes de test (test Bowie & Dick, test de fuite sous vide)
- ✓ Le joint de porte est en silicone de haute qualité, résistant aux températures élevées, durable et ne se déforme pas.
- ✓ Équipé d'un capteur de coupure de niveau d'eau et d'un indicateur de niveau d'eau. S'il y a un manque d'eau, la machine cessera de fonctionner.
- ✓ Équipé d'un connecteur de test PT/TT, facile à exécuter le test.
- ✓ Pompe à vide intégrée de haute qualité, pour assurer une évacuation efficace de l'air pour une vapeur saturée optimale et assurer une bonne stérilisation.
- ✓ Équipé d'un filtre bactérien de 0,22 µm, assurez-vous que l'air stérile pénètre dans l'environnement de vide interne, évitez la deuxième contamination.
- ✓ Type de roue à main à structure de porte à ouverture rapide, joint de type autogonflant.
- ✓ Générateur de vapeur indépendant adopté, avec une efficacité de chauffage élevée.
- ✓ Système de circulation interne de vapeur et d'eau : Il n'y a pas de décharge de vapeur et l'environnement de stérilisation sera propre et sec.
- ✓ Arrêt automatique avec un bip rappelant après la stérilisation.
- ✓ Entièrement en acier inoxydable 304 de haute qualité.
- ✓ Imprimante intégrée, enregistre tout le cycle de stérilisation.
- ✓ Accessoires : Tuyaux de vidange, seau de vidange (échappement), paniers en acier inoxydable.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vide pulsé à affichage LCD avec imprimante

Modèle YR05673 // YR05675



Dispositif de Sécurité:

- ✓ protection de l'appareil de chauffage
- ✓ chauffage anti-sec
- ✓ Verrouillage de porte de sécurité : Le programme ne peut pas démarrer lorsque la porte est déverrouillée dans des conditions normales. La porte est verrouillée et ne peut pas être ouverte lorsqu'il y a de la pression dans la chambre.
- ✓ Protection contre la surchauffe : adaptez le PT100 avec la classe de précision A pour la surveillance de la température dans la chambre, collectez les données de température en temps réel, protégez et alarmez lorsque la température dépasse la valeur prédéfinie.
- ✓ Protection contre les surpressions : la soupape de décharge commence à relâcher automatiquement la pression lorsque la pression dans la chambre et le générateur de vapeur dépasse la valeur prédéterminée.
- ✓ Soupape de sécurité à déclenchement automatique
- ✓ Protection contre les surintensités
- ✓ Dispositif de protection de la sécurité électrique : le fusible protège les centrales en cas de court-circuit ou de surcharge.
- ✓ Dispositif de protection contre la surchauffe : Un écart de température élevé dans la chambre active le dispositif de protection qui coupe immédiatement la source de chaleur.
- ✓ Surcharge de la pompe à vide : la pompe à vide s'arrête et déclenche une alarme lorsque son moteur est surchargé ou verrouillé lorsque la pompe à vide est en marche..



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vide pulsé à affichage LCD avec imprimante

Modèle YR05673 // YR05675



Spécifications techniques:

Modèle	YR05673	YR05674	YR05675
max. Pression		0.23Mpa	
la pression de travail		0.22Mpa	
max. la température		136°C	
Température de travail		134°C	
Plage de température de travail		105 – 134°C	
taux de vide		-0.081Mpa	
temps de stérilisation		0 à 99 minutes	
Temps de séchage		0 à 99 minutes	
précision de la température		0.1°C	
chaleur moyenne		≤±1°C	
Écrire	Autoclave à vide pulsé vertical		
Classe	Classe B		
Contrôler	Microprocesseur		
Porte	Porte à ouverture rapide type volant		
Affichage	écran LCD		
système de séchage	séchage sous vide		
pompe aspirante	Incorporé		
Générateur de vapeur	Incorporé		
programme de stérilisation	Programme prédéfini + programme défini par l'utilisateur + programme de test		
Réservoir d'eau	Oui		
Imprimante	Oui		
panier de stérilisation	2 pièces		
langage	Anglais		
Tension	220-240V, 50/60Hz, monophasé		
Taille de la chambre (mm)	50L / Ø340×550	80L / Ø420×600	100L / Ø440×650
Taille extérieure (mm)	660×460×1160	700×520×1250	700×520×1250
Taille de l'emballage (mm)	820×600×1400	820×620×1450	820×620×1450
GW / NO	120/100kg	172/142kg	176/146kg



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)

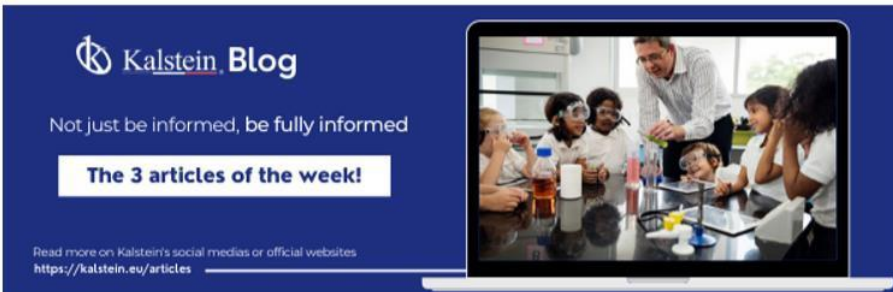

Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

