




SECTEUR DENTAIRE

UNITES DENTAIRES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

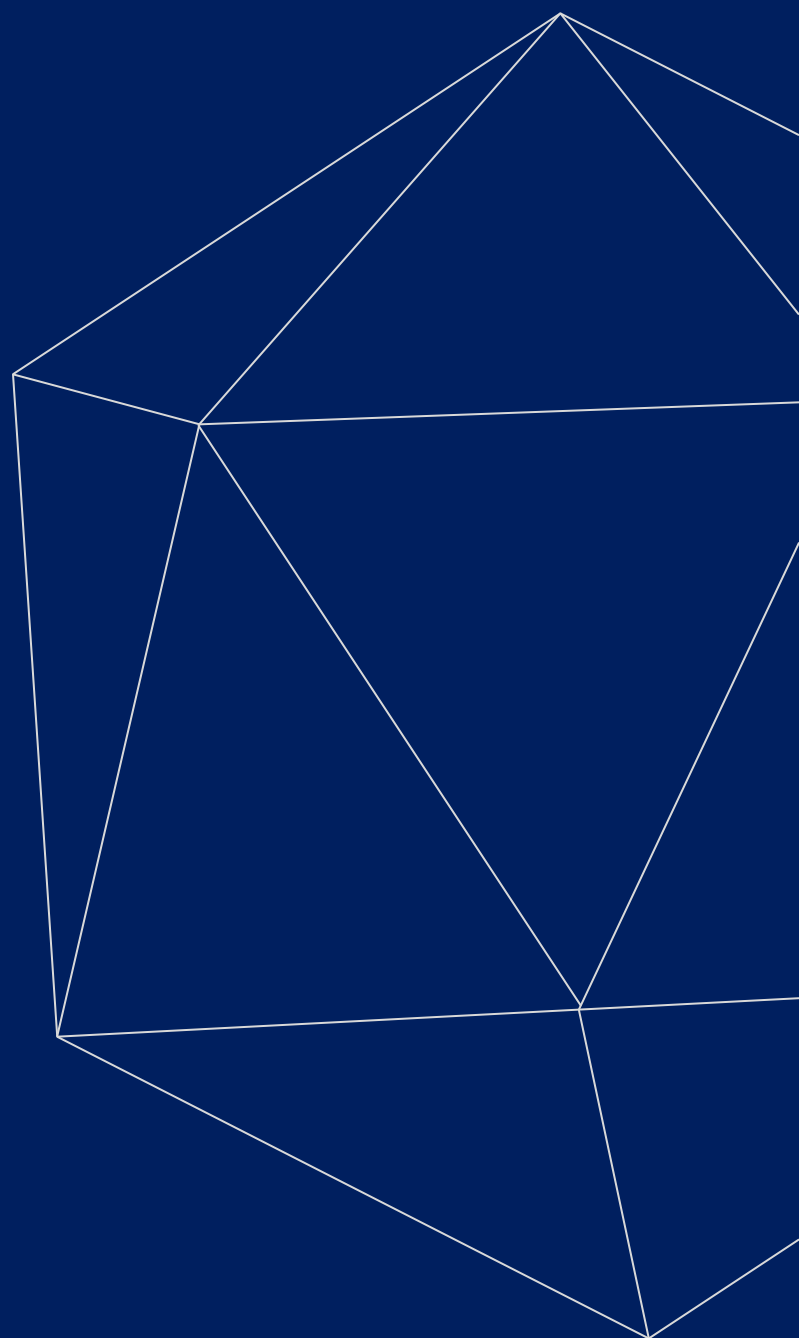

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Secteur Dentaire
Unité de Chaise Dentaire de Désinfection
Modelé YR06011



Description du produit:

- ✓ Chaise dentaire de désinfection YR06011, sûre et intelligente, désinfection d'une clé, renforce la sécurité des voies navigables, est une couverture complète, tube à main, pistolet à trois usages, tube de détartrage, tuyau de bain de bouche et d'entrée d'eau, décompose complètement le tissu de biofilm dans le tuyau.
- ✓ Et en même temps, éliminer les bactéries et les virus portés par le biofilm, en veillant à ce que la qualité de l'eau réponde toujours aux exigences réglementaires.
- ✓ Rinçage automatique à un bouton: avant le début du diagnostic et du traitement quotidiens, rincer la sortie d'eau de l'eau de diagnostic et de traitement pendant au moins 30 secondes, après chaque diagnostic et traitement, rincer la voie d'eau reliée à l'équipement buccal pendant au moins 30 secondes, ce qui satisfait aux exigences d'entretien quotidien de la voie d'eau de l'unité dentaire.
- ✓ Dispositif anti-aspiration: empêcher l'eau ou d'autres milieux dans l'instrument de retourner à la canalisation de prix de chaise dentaire en raison de l'écoulement inverse.
- ✓ Système de drainage: qu'il s'agisse de la désinfection automatique du tuyau ou du rinçage automatique du tuyau à un seul bouton, la position du fauteuil va automatiquement monter à la position la plus haute, drainant complètement l'eau accumulée dans le tuyau, empêchant la croissance des bactéries et des odeurs après que la saleté reste.
- ✓ Le tube extérieur du tube de l'instrument: la canalisation reliant les instruments oraux est en contact direct avec le sol pour éviter que le tube extérieur ne soit pollué par frottement avec le plancher de la clinique.
- ✓ Programme de désinfection très intelligent: désinfection à clé unique, précise et efficace.
- ✓ Le milieu dans le tuyau est rincé avec de l'eau propre pendant 2 minutes pour commencer la désinfection, ce qui permettra d'obtenir l'effet maximal de la désinfection du tuyau.
- ✓ Injectez automatiquement de l'eau désinfectante dans toutes les canalisations d'eau buccale et rincez automatiquement, ce qui économise du temps et des efforts.
- ✓ De l'eau stérilisée est trempée dans la canalisation pendant 19 minutes et 30 secondes pour décomposer complètement le tissu du biofilm dans la canalisation.
- ✓ Rincer automatiquement le désinfectant résiduel dans la canalisation pendant 2 minutes et 30 secondes pour assurer la sécurité de l'eau utilisée pour le diagnostic et le traitement sur le corps humain et la durée de vie de l'unité de chaise dentaire.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tlf: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Secteur Dentaire
Unité de Chaise Dentaire de Désinfection
Modèle YR06011



Expérience de traitement dentaire confortable:

- ✓ Dossier hydroformé robuste et cadre de siège, le prix de la chaise dentaire donne aux patients le premier sentiment de sécurité.
- ✓ Le coussin ergonomique de la chaise maintient le patient dans la position la plus confortable à tout moment. Cela garantit une opération plus ciblée et plus efficace par le dentiste.
- ✓ L'unité de chaise dentaire S6 est un système de commande de montée lente ou de pause lente qui est adopté pour éliminer la frustration du patient causée par la course de la chaise.

Modèle	YR06011
Seringue 3 voies (froide/chaude)	2 ensemble
Powerful suction device	1 ensemble
Éjecteur de salive	1set
Lumière dentaire	1set
Système d'eau chaude	1set
Système d'alimentation en eau pure	1set
Crachement rotatif en céramique	1set
Chaise motorisée DC 24V	1set
Dispositif d'assistance multifonctionnel	1set
Lecteur de rayons X à LED	1set



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tit: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

